



NOYAN
Teb Manely

از بین بردن لکه های پوستی / تتو / جوان سازی پوست

Q-SWITCHED ND YAG LASER




WWW.NOYANTEBMANELY.COM

اصول درمان

لیزر کیوسوییچ

چگونه کار می کند

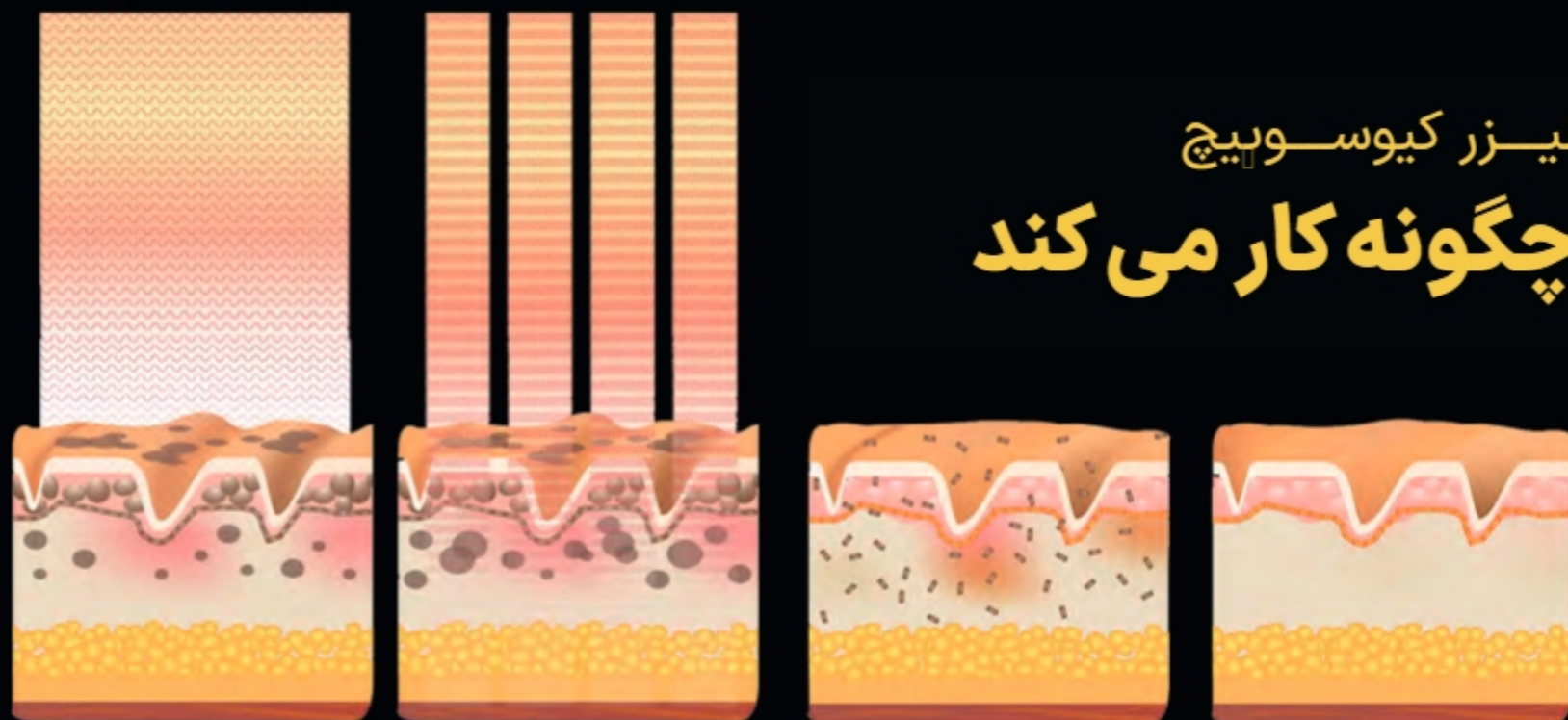

ملانین درون‌زاد به شدت انتخابی لیزرهای Q-switched به صورت یک شاتر پرسرعت عمل می‌کند. میله های لیزر انرژی را در مقادیر بالا ذخیره کرده و به صورتی بهینه آن را روی آسیب دیده ترین قسمت های پوست می تاباند. پالس های پرسرعت باید روی نواحی آسیب دیده خارج شوند تا کاری کنند که پوست از درون بهبود یابد. پالس ها به صورت نانو ثانیه ساطع شده و اشعه هم یکنواخت باقی می‌ماند تا عوارضی ایجاد نشود.



NOYAN
Teb Manely



۴ نوع سری درمان کننده

چهار نوع سری درمان کننده شامل نوع ۵۳۲ نانومتری،
۱۰۶۴ نانومتری، لنزهای پوستی کربنی ۱۳۲۰ نانومتری،
لنزهای فرکشنال ۷۵۵ نانومتری، به شکلی جامع نیازهای
درمانی انواع مشکلات پوستی را برآورده می‌کند.



لنزهای پوستی کربنی
۱۳۲۰ نانومتری



۱۰۶۴ نانومتری



۵۳۲ نانومتری



لنزهای فرکشنال
۷۵۵ نانومتری (اختیاری)

لنزهای ۵۳۲ و ۱۰۶۴ نانومتری

لنزهای ۵۳۲ و ۱۰۶۴ نانومتری اصولاً برای از بین بردن لکه های پوستی شامل انواع پتو، پتوهای ابرو، لک یا خال های اپیدرم (epidermal) و درم (dermal) استفاده می‌شوند.





لنزهای پوستی کربنی ۱۳۲۰ نانومتری

پوسته فیشال لیزری کربنی نوعی درمان لیزری فووی جدید است که کاملاً بدون درد است. این فناوری به شدت برای افرادی که هر کدام از مشکلات پوستی زیر را دارند مفید است:

- پوست چرب
- جوش های سر سیاه
- منافذ بزرگ شده
- پوست بی حال و سست شده
- آکنه در سرتاسر صورت و بدن



همین طور راهی عالی برای لایه برداری و تازه کردن پوست است که خیلی سریع ظاهری تازه و شاداب به پوست شما می دهد و باعث می شود که پوست نرم تر، صاف تر و سفت تر بشود.



سیستم خنک سازی بی نظیر



لنزهای فرکشنال

لنزهای فرکشنال برای کاهش زمان ایجاد بر هم کنش بین اشعه لیزر و پوست استفاده می‌شوند. دلیلش این است که افزایش مواجه لیزر با پوست می‌تواند به پوست آسیب وارد کند. لیزردرمانی راهی سریع برای بهبود بافت آسیب دیده بوده و سطح پوست را با پثبیت الگوی داخلی آن تقویت می‌کند.

WWW.NOYANTEBMANELY.COM



سیستم خنک سازی بی نظیر این دستگاه نه تنها تضمین کننده عملکرد منسجم آن برای ۱۲ ساعت بدون توقف است بلکه ثبات دستگاه و دسته آن را هم تضمین می‌کند و همین طور طول عمر دستگاه و دسته آن را هم افزایش می‌دهد.



قدرتمندتر
و پایدارتر

7 ϕ

میله لیزری روسی

میله لیزر اصلی‌ترین قسمت دستگاه بوده و کیفیت آن تأثیر مسبقیمی روی قدرت انرژی لیزر دارد. عموماً هر چقدر که قطر میله لیزر بیشتر باشد، انرژی آن هم بیشتر خواهد بود. شرکت ما از میله لیزری وارد شده از روسیه استفاده می‌کند که قطر ۷ میلی متری، انرژی و طول عمر بالایی دارد.

بازتابنده نقره ای

بازتاب دهنده یا رفلکتور از نقره ساخته شده، که به راحتی اکسید نمی‌شود. همین‌طور انرژی و طول عمری بالاتری هم دارد.



NOYAN
Teb Manely

لامپ زنون انگلیسی

لامپ زنونی انگلیسی با قطر ۷ میلی‌متر انرژی و طول عمر بالایی دارد. ضمانت ۵ میلیون شات هم برای آن در نظر گرفته شده است.



WWW.NOYANTEBMANELY.COM

سیستم عملکردی هوشمند

رابط کاربری هوشمند ۴ حالتی - کاربرپسند که هر اپراتوری می‌تواند به راحتی با آن کار کند.



NOYAN
Teb Manely

WWW.NOYANTEBMANELY.COM

مشخصات فنی



NOYAN
Teb Manely

توان:	۸۰۰ وات
انرژی:	۳۰۰ الی ۱۰۰۰ میلی ژول
فرکانس خروجی:	۱ الی ۶ هرتز
اندازه صفحه نمایش:	۸ اینچ
طول موج:	۱۳۲۰، ۱۰۶۴، ۵۳۲ نانومتر
سیستم خنک کننده:	خنک کنندگی هوا + آب
وزن خالص:	۲۲ کیلوگرم
بعد، ابعاد، اندازه:	۴۸۰ در ۴۲۰ در ۳۲۰ میلی متر
اندازه بسته بندی:	۶۱۵ در ۵۷۵ در ۴۰۰ میلی متر
وزن ناخالص:	۳۲ کیلوگرم
ولتاژ:	۲۲۰ ولت AC با تولرانس ۱۰ درصد، ۱۰ آمپر، ۵۰ هرتز، ۱۱۰ ولت با تولرانس ۱۰ درصد، ۱۰ آمپر، ۶۰ هرتز

